

Omniplast®

Kirurgisk textiltejp med zinkoxid

Vid många tillfällen i vården behövs en tejp som sitter ordentligt på plats, det kan handla om förbandsfixering eller säkring av kanyler och sonder. Omniplast sitter stadigt på plats och låter samtidigt huden andas eftersom häftmassan är applicerad i strängar.

Häftmassan är applicerad i strängar vilket ger huden möjlighet att andas



Lätt att riva av eftersom tejpens har tandade kanter

Häftar säkert men kan ändå avlägsnas smärtfritt



Indikation

Alla sorters förbandsfixering, även för kanyler, sonder och katetrar.

Passar för patienter med normal hud.

Kontraindikationer:

Försiktighet bör iaktas vid skör hud.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Omniplast är en beige, hypoallergen textiltejp med häftmassa som innehåller zinkoxid. Zinkoxid har en svagt sammandragande och lugnande effekt på huden.

Egenskaper

Omniplast är genomsläpplig för luft och fukt tack vare att häftmassan är applicerad i strängar.

Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.

Omniplast är lätt att riva av både på längden och tvären utan att tejpen fransar sig.

Omniplast absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar. Omniplast släpper inte igenom UV-A, UV-B eller UV-C strålning från solen.


Material

100% viskosväv, vattenavvisande.

Häftmassan är baserad på syntetiskt gummi innehållande 17% zinkoxid (ca 14 g/m²). Fri från kolofonium och latex. Spole av polystyren.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.

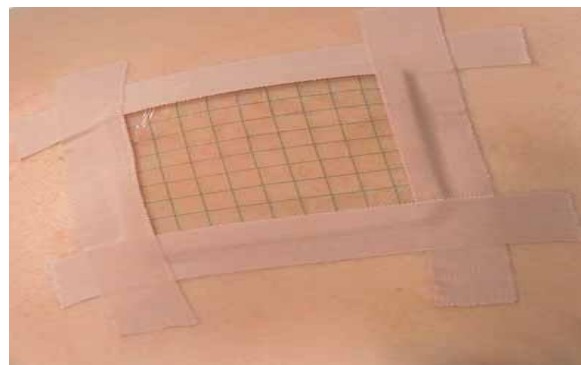

Omniplast används för att fixera gelplattan Hydrosorb.



Så här river du Omniplast på rätt sätt.

| Sortiment | Storlek | Art.nr. | Afp | Tfp |
|-------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|
| Omniplast. | 5 m x 1,25 cm | 900 530 | 10 st | 36 Afp |
| På rulle, med skyddshölje, i ask | 5 m x 2,5 cm | 900 531 | 10 st | 24 Afp |
| | 5 m x 5 cm | 900 532 | 10 st | 12 Afp |
| Omniplast. | 9,2 m x 1,25 cm | 900 570 | 5 st | 36 Afp |
| På rulle, i ask | 9,2 m x 2,5 cm | 900 571 | 5 st | 24 Afp |
| | 9,2 m x 5 cm | 900 572 | 2 st | 36 Afp |

Fördelar:

Säker fixering

Lätt att riva av

Stänger ute UV-strålning

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex